



CRIOLIPÓLISE

DÊ UM GELO  
NA GORDURA





Kryus é o novo equipamento de criolipólise da Tonederm que realiza a técnica de contraste, na qual o aquecimento monitorado antes e após o resfriamento torna o tratamento mais eficiente, seguro e confortável.

De maneira não invasiva, o Kryus atua seletivamente no tecido adiposo através do resfriamento controlado, que promove a morte dos adipócitos por apoptose, eliminando a gordura gradativamente.

#### CRIO-LIPÓLISE DE CONTRASTE

Permite ajustar o tempo de aquecimento, resfriamento e temperatura para cada aplicador.

#### SISTEMA DE VÁCUO CONTÍNUO E PULSADO

Torna o tratamento mais confortável.

#### AJUSTE INDEPENDENTE DE INTENSIDADE DE VÁCUO

#### FUNÇÃO AUTOMÁTICA DE LIMPEZA DO SISTEMA DE VÁCUO

Proporciona melhor higienização e maior durabilidade do equipamento.

#### MEMBRANA ANTICONGELANTE EXCLUSIVA



#### 4 APLICADORES

O equipamento vem com 4 aplicadores (2 de tamanho médio, 1 grande e 1 pequeno) que permitem tratar diversas áreas do corpo.



#### APLICADORES SIMULTÂNEOS


Permite utilizar 2 aplicadores ao mesmo tempo, com controles independentes.

#### APLICADOR TRANSPARENTE

Garante maior visibilidade da área de tratamento.




## VEJA COMO FUNCIONA A CRIOLIPÓLISE

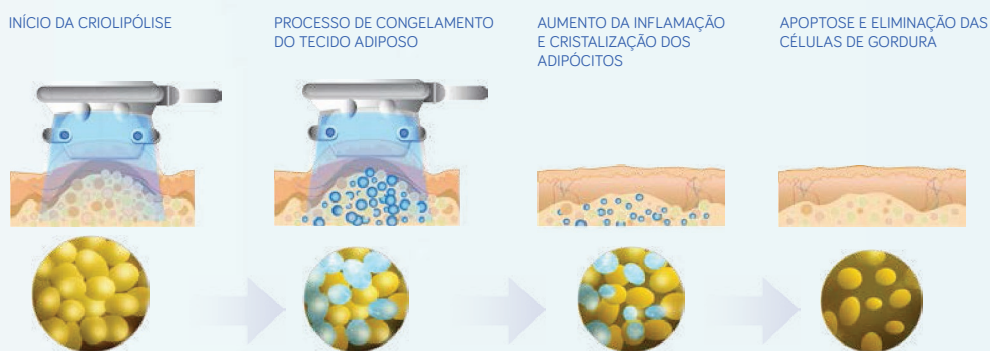

### SISTEMA DE RESFRIAMENTO ALTAMENTE EFICAZ

Garante uniformidade de temperatura da área tratada e maior eficiência térmica.

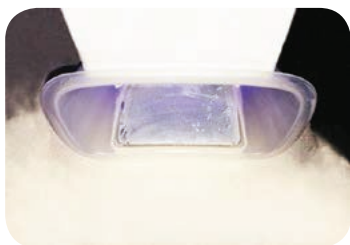

### EMERGENCY STOP

Dispositivo de segurança utilizado pelo paciente que permite interromper a aplicação em caso de desconforto.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### Características elétricas para alimentação

Tensão de trabalho: 220 V - 50/60 Hz

Potência de entrada: máx. 1000 VA

Aquecimento: 37°C ~ 40°C

Refrigeração: 5°C ~ -11°C

Intensidade de vácuo: 10 ~ 80 KPa

Indicação luminosa de contraste

Volume: 130x66x51 cm

Fusível: F250VL10A

Temperatura ambiente: 5°C ~ 40°C

Umidade relativa: 80%

OPÇÃO DE COMPRA EM 127 OU 220 VOLTS



Com sabedoria de quem já tem quase cinquenta anos de história, a TONEDERM acredita que a beleza é algo muito grande para caber em um padrão ou fórmula. Trata-se de equilíbrio, harmonia, autoestima, identidade, felicidade e até de inspiração.

Queremos levar para mulheres de todo mundo a mensagem de que a verdadeira beleza não aprisiona, mas liberta.



(54) 3209.5600 | [www.tonederm.com.br](http://www.tonederm.com.br)

 /tonederm